



全身舒暢 讓全家人健康有活力

減輕負擔
輕鬆動人

精采生活每一天!

醫卡低週波 舒活機

各部位名稱和作用

液晶螢幕顯示窗

選擇使用之程式、力道強弱
及使用時間

傳導貼片

背面需貼果凍狀的「粘著
貼片」，使用時才能貼附
於皮膚上，不至於滑落

DOWN/OFF 鍵

每按此鍵一次刺激強度可降一
個階段，連續按至螢幕消失，
可將電源關閉 (off)


ON/UP 鍵

按此鍵後電源開啟，每按
一次刺激強度增強一個階
段，最強為15階段

MODE 程式選擇鍵

選擇10種運動按摩程式

電池蓋

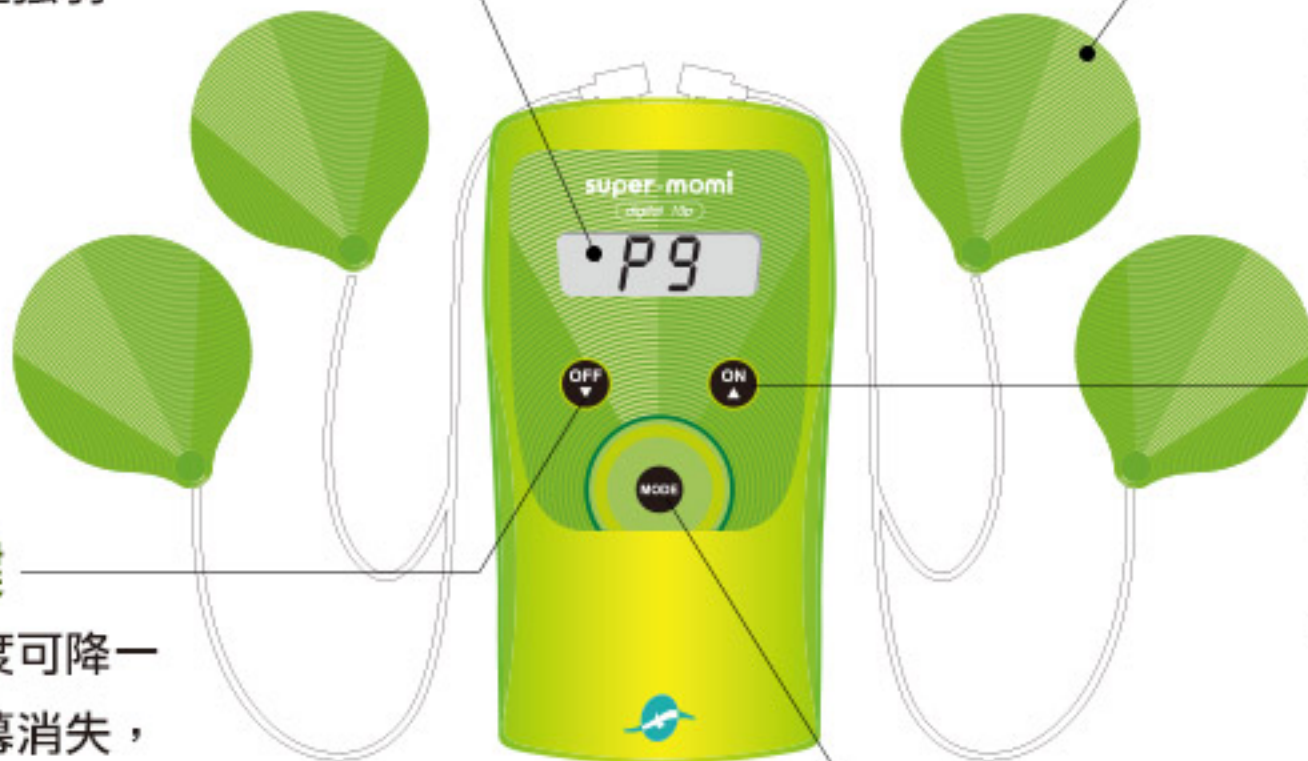

電池的安裝方式

〈必須使用**9V電池**1顆〉 * 更換電池前請確認主機處於關機狀態進行。

1. 將電池盒從機體
背部推出



2. 準備好9V電池1顆，
並按照電池盒內正負極
指示安裝




3. 然後將電池盒裝回
機體原位置



傳導貼片的安裝方式


1. 將傳導線的一端插入主機上方的凹槽

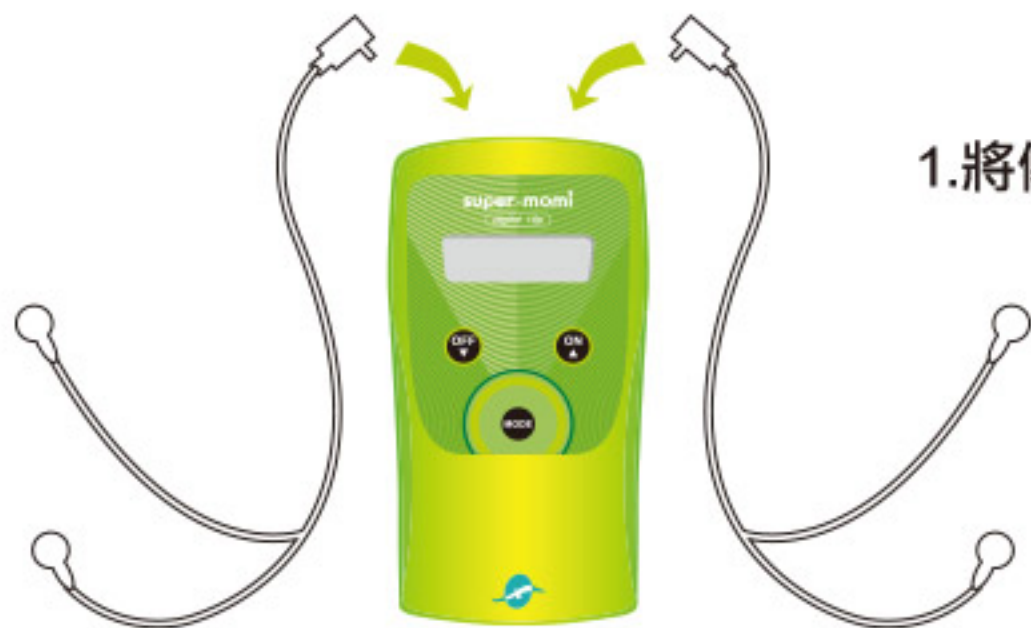

2. 另一端分歧線則分別扣上兩片傳導貼片
方便操控，並可同時貼附於四個部位使用



如何一開始使用就上手

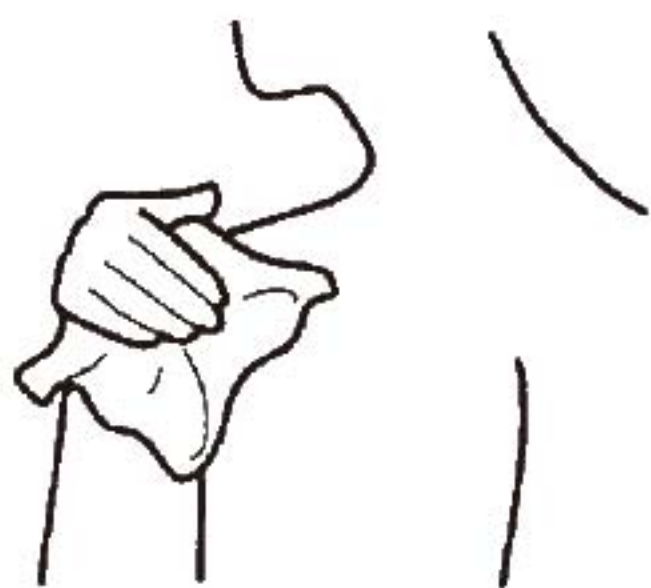

1 貼附前，請用濕毛巾等把皮膚上的油脂、化妝品和污物清洗掉。



2 在確認關閉電源的條件下，將同一條傳導線上之2片傳導貼片，同時貼附在皮膚上（想運動哪裡就貼哪裡），再開始操作。



3 按下開機鍵（ON▲），接通電源，待液晶螢幕顯示後，按（MODE）鍵可選擇10組全自動按摩運動程式（P1-P0）。



4 選擇好按摩程式後，繼續按右方開機鍵ON▲鍵可增加強度，最強為15級，建議您由弱而強，切忌直接開太強可能適應不易。



5 如欲減弱強度，請按OFF▼鍵，即可減弱強度。



6 經過30分鐘後電源會自動關機，如需中途停止或更換貼附位置，請按OFF▼鍵多次至**液晶螢幕消失**，即是關機。



7 使用後必需將傳導貼片貼在“保管用塑膠膜”上，二面皆可貼附，避免粘著貼片污損。

⚠ 注意

同一條傳導線的二片傳導貼片需同時貼在皮膚上，否則並無法產生作用，使用前請特別主意。